



Artone communication solutions
www.artonecs.com

BENUTZERHANDBUCH



Artone - MIC Wireless microphone

Vielen Dank, dass Sie sich für Artone entschieden haben.

Das Artone-MIC ist ein drahtloses Mikrofon, das entwickelt wurde, um eine klare Schallübertragung über eine Entfernung zu ermöglichen.

In einer Situation lauter Umgebungsgeräusche ermöglicht Artone MIC eine klare Klangübertragung von der Quelle zum Artone Streamer.

Benutzer von Hörgeräten/Cochlea-Implantaten können Artone MIC in jeder Umgebung verwenden, um die Funktion des Hörgeräts zu verbessern. Der Ton der Audioquelle wird vom drahtlosen Mikrophon aufgenommen und direkt an den Artone Empfänger und dann an das Hörgerät des Benutzers übertragen. Das vom Hörgerät empfangene Geräusch ist viel einfacher zu verarbeiten, da es nicht alle zusätzlichen Geräusche enthält, die das Geräusch aufnimmt, wenn es eine bestimmte Entfernung zurücklegt.

Menschen mit Hörverlust können das Artone MIC als drahtloses Verstärkungssystem verwenden,

während sie über Kopfhörer mit dem Artone Empfänger verbunden sind.


Streamer. Das TVB kann auch ein Smartphone zur Übertragung von Musik an eine Heimstereoanlage aktivieren.

Das kompakte Design und die interne wieder aufladbare Batterie sorgen für eine lange Spielzeit und Vielseitigkeit im Einsatz.

Der TVB ist die ideale Lösung, um ein klares Audiosignal ohne Verzögerung oder Störungen zu übertragen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bis zum Ende durch.

1. Produktübersicht

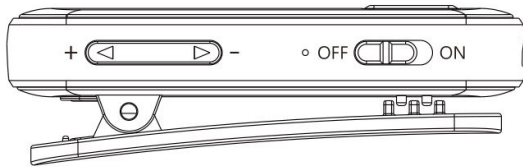

- ① Leistungsschalter
- ② Volumen/ Empfindlichkeitstasten
- ③ Stumm / Pairing-Taste
- ④ 3.5mm Audioeingang
- ⑤ Aufladestation
- ⑥ LED Indikator
- ⑦ Klemme

1.1 Was ist in der Box?

- 1 x Artone MIC.
- 1 x Lapel Mikrofon (optional).
- 1 x 3.5 mm audio kabel.
- 1 x USB Ladekabel.
- 1 x Benutzerhandbuch.

1.2 Produktmerkmale

Größe	53 (L) x 18.3 (W) x 17 (H)mm
Gewicht	9.5g
Bereich	10 -20m im / draußen
Arbeitszeit	bis zu 7h

Ladezeit	90min
Ladespannung	5V DC
Kabellose Version	V 4.1

1.3 Steuerfunktionen

Funktion	Betrieb
Ein- und Ausschalten	Stellen Sie den Ein- / Ausschalter auf die gewünschte Position
Pairing	Wenn der Schalter eingeschaltet ist, beginnt die Kopplung automatisch, Artone MIC in den Pairing-Modus versetzen

	Drücken Sie ③ Stummschalten /4.Pairing-Taste.
Abspielen / Stummschalten	Um das Hören zu beenden, aber mit dem Empfänger verbunden zu bleiben, drücken Sie ③ Stummschalttaste/Pairungstaste.

1.4 LED Indikationen

Indikator	Bedeutung
Ein	Blaues Licht blinkt alle 1 Sekunde
Verbindungsmodus	Rotes / blaues Licht blinkt abwechselnd
Gepaart und verbunden	Blaues Licht blinkt alle 5 Sekunden
Aufladen	Rotes Licht scheint
Voll aufgeladen	Blaues Licht scheint

2. Gerät benutzen

2.1 Aufladen

Das Artone MIC verfügt über einen eingebauten Akku, der lange Betriebs- und Standby-Zeiten ermöglicht.

1. Stecken Sie ein Ende des Micro-USB-Ladekabels in die TVB-USB-Buchse und das

andere Ende in eine andere Standard-USB-Stromquelle.

2. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, laden Sie es für mindestens 2 Stunden auf die volle Kapazität auf.

3. Wenn die LED-Ladeanzeige erlischt, ist das TVB betriebsbereit/der Akku ist vollständig geladen.

2.2 Kopplung im TX-Modus mit einem Gerät

1. Vergewissern Sie sich, dass die TVB auf den TX-Modus eingestellt ist und dass das Gerät ausgeschaltet ist.

2. Schließen Sie das TVB an Ihren Fernseher (oder ein anderes drahtloses Audioübertragungsgerät (z.B. Audioquellen-System iPod, etc.) an.

3. Schalten Sie die TVB ein und stellen Sie sie in den Pairing-Modus (drücken Sie die Power-Taste zweimal).

4. Platzieren Sie den TVB in einem Abstand von 1 Meter zu Ihrem drahtlosen Empfänger, wie z.B. Kopfhörer oder drahtloser Lautsprecher. TVB sucht, koppelt und verbindet sich automatisch mit ihm.

2.3. Kopplung im TX-Modus mit zwei Geräten gleichzeitig

Im TX-Modus kann die Kopplung mit zwei drahtlosen Geräten gleichzeitig durchgeführt werden.

1. Koppeln Sie die TVB mit Ihrem ersten Gerät unter Verwendung der vorherigen Anweisungen.

2. Schalten Sie die Wireless-Funktion Ihres Geräts aus und tippen Sie auf den Ein- / Ausschalter.

3. Schalten Sie die Wireless-Funktion Ihres Geräts ein.

4. In ungefähr 10 Sekunden stellt das erste Gerät automatisch eine Verbindung her. Wenn die automatische Verbindung fehlgeschlagen ist, klicken Sie auf die Link-Schaltfläche Ihres Geräts.

2.4 Pairing in RX mode

1. Stellen Sie sicher, dass der TVB auf RX-Modus eingestellt ist und das Gerät ausgeschaltet ist.

2. Schließen Sie das TVB an Ihr nicht-drahtloses Audioempfangsgerät an (wie eine Stereoanlage usw.).

3. Schalten Sie den TVB ein.

4. Aktivieren Sie die Wireless-Funktion auf Ihrem Gerät (wie Smartphone oder Tablet usw.) und suchen Sie nach Wireless-Geräten in der Nähe.

5. Finden Sie das "Artone-TVB" in den Suchergebnissen und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.

Notiz

- Der TVB wechselt beim ersten Einschalten automatisch in den Pairing-Modus.

- Der TVB kann sich an zuvor gekoppelte Geräte erinnern und versucht, diese automatisch zu koppeln, ohne in den Koppelmodus zu wechseln.
- Der Pairing-Modus dauert 2 Minuten. Der Receiver wechselt in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 2 Minuten keine Geräte angeschlossen werden können.

Beachtung

- Der ursprüngliche Kopplungsspeicher wird nach einem Moduswechsel entfernt. • Wenn zum Koppeln ein PIN-Code erforderlich ist, versuchen Sie 0000, 8888, 1111, 1234.

2.5 Koppeln im Empfangsmodus mit zwei Geräten gleichzeitig

Im Empfangsmodus kann das Pairing mit zwei drahtlosen Geräten gleichzeitig durchgeführt werden.

1. Koppeln Sie den TVB mit Ihrem ersten Gerät, indem Sie die vorherigen Anweisungen befolgen.
2. Deaktivieren Sie die Wireless-Funktion auf Ihrem ersten Gerät. Tippen Sie zweimal auf den Ein- / Ausschalter, um die Verbindung zum 2. Gerät herzustellen.
3. Schalten Sie die Wireless-Funktion am 1. Gerät ein.
4. In ungefähr 10 Sekunden stellt das erste Gerät automatisch eine Verbindung her. Wenn die automatische Verbindung fehlschlägt,

drücken Sie die Verbindungstaste an Ihrem Gerät.

Hinweis

- Es kann immer nur ein Gerät gleichzeitig Musik abspielen. Sie müssen die Musik auf einem Gerät anhalten, um sie auf dem anderen wiedergeben zu können.

- Wenn der TVB eingeschaltet wird, stellt er automatisch die Verbindung zum zuletzt angeschlossenen Gerät wieder her.

3. FAQs

1. Der Artone TVB lässt sich nicht einschalten.

Bitte berechnen Sie es.

2. Probleme beim Pairing mit einem Empfänger.

Bitte stellen Sie Folgendes sicher:

- Der kabellose Stereoempfänger unterstützt das A2DP-Profil.

- das TVB und der Empfänger sind beide innerhalb von 1 m angeordnet.

- Das TVB ist bereits in den Pairing-Modus eingetreten und die LED-Anzeige blinkt durch Drehen blau und rot.

3. Vom angeschlossenen und gekoppelten Receiver wird kein Ton wiedergegeben.

Bitte stellen Sie Folgendes sicher:

- die TVB ist ordnungsgemäß an die Audioquelle angeschlossen.
- die Audioquelle Musik abspielt und der ausreichend lautere Ton auf beiden Geräten eingeschaltet ist.
- finden Sie in der Bedienungsanleitung des gekoppelten Gerätes.

4. Sicherheitshinweise

Um eine Beschädigung oder Fehlfunktion des Gerätes zu vermeiden.

Artone - TVB, folgen Sie den nächsten Regeln.
follow the next rules.

1. Do not drop from high places.

2. Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und allen anderen Flüssigkeiten fern.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
4. Modifizieren, reparieren oder demontieren Sie dieses Gerät, insbesondere den Akku, nicht.
5. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
6. Verwenden Sie nur eine qualifizierte Servicestelle.

FC compliant

CE

